

Korduvkasutatav näokaitse – ohutus ja mugavus, mis kestab kogu päeva



See näokaitse on väljatöötatud koos haiglate intensiivosakonna töötajate ja nakkushaiguste spetsialistidega*

Näokaitse

Näokaitsme peamine funktsioon on kaitsta nägu otsese kokkupuute eest vedelike ja aerosoolidega. Näokaitsme sekundaarne eesmärk on kaitsta nägu otsese kokkupuute eest potentsiaalselt saastunud kätega.

DESINFITSEERI ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST!

Kokkupanemisjuhised on lehe teisel poolel.

Pakendi sisu

1 x näokaitsme raam	3 x läbipaistvat visiiri
1 x reguleeritav ülemine rihm	1 x reguleeritav küljerihm
1 x polsterdusriba näokaitsme raamile	1 x kasutusjuhend koos kokkupanemisjuhistega

Tootja ja edasimüüja

3D Technology LTD
Registreerimise Nr. 42103085103
71 Gustava Zemgala tänav, Riia, LV-1039, Läti (Latvija)

Ladustamine

Avamata pakendit võib ladustada kuni 12 kuud

Tootmiskuul ja -aasta

05.2020

Sertifikaat



Väljitud ohud

Kaitse ohtlike materjalide pritsmete eest – vedelikud, aerosoolid ja näo suunal paikuv praht.

Kaitseomadused

- Kaitseb tervet nägu – ulatudes kõrvast kõrvani mõlemalt poolt nägu.
- Kaitseb nägu ülalt, mis on eelkõige tähtis meditsiinitöötajatele, kes kummarduvad sageli oma patsientide poole.
- Õnnetuste korral kergesti eemaldatav.
- Löögikindel – visiir ei purune kukkudes ega paindudes.
- Piirab kokkupuudet näo ja potentsiaalselt saastunud käte vahel.
- Võimalik kanda koos lugemisprillide, kaitseprillide, meditsiiniliste maskide ja respiraatoritega.
- Võimalik kanda koos mütside, kapuutsidega ning enamike kiivritega.

Materjalid

Raam	ABS (Akrüül-niitriil-butadien-stüreen)
Rihmad	PET ja PVC (Polüetüleen-tereftalaat ja polüvinüülkloriid)
Visiir	PET (variatsioonid sisaldavad PET, PET-A, PET-G)
Polsterdus	Inertne kumm või silikoon

Visiiri paksus

0,45 – 0,75 mm (kõigil paksustel on sama funktsionaalsus ja ei mõjuta läbipaistvust – sõltub materjali saadavusest).

Korduvkasutatav

Jah – mõeldud ühele inimesele; puhastamise ja desinfitseerimise korral korduvkasutatav.

Desinfitseeritav

Jah – kõiki osi saab tõhusalt pesta ja desinfitseerida.

Pearihm

Jah – üle pea ülaosa ja ümber pea.

Kohandatav suurus

Jah – kõik pea suurused.

Vedelikukindel

Jah – võib üleni desinfitseerimisvahendi või vee sisse kasta.

Mõõdud

Kõrgus 240 x Laius 160 x Sügavus 136 mm (kokkupanduna).

Netokaal

78 – 105 grammi sõltuvalt visiiri materjali paksusest.

Oluline teave

Kõik komponendid on valmistatud materjalidest mis on pestavad ja desinfitseeritavad.

Näokaitse koosneb modulaarsetest komponentidest, mis on kõik väljavahetatavad ja võimaldavad näokaitsme edasist kasutamist. Varuosade kohta võtke ühendust estonia@shield48.eu kaudu.

Näokaitse ei sisalda ühtegi metallosa ega riidest komponenti.

Komplekt sisaldab kolme läbipaistvat visiiri. Korraliku hoolduse ja puhastamise korral kestab iga visiir vähemalt 10 päeva (kokku minimaalselt 30 päeva).

Igal visiiril on mõlemal küljel transpordiga seotud kriimustuste vältimiseks kaitsekile. Eemaldage kaitsekile enne kasutamist!

Iga näokaitse on mõeldud ainult personaalseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud mitmele erinevale inimesele ja rihmade korduv reguleerimine võib nende kinnitusavad ära kulutada.

* Näomaski väljatöötamise iga sammu osas konsulteeriti Paul Stradinsi kliinilise ülikooli haigla nakkushaiguste ja epidemioloogia nõustamisüksusega, mida juhib Riia (Läti) professor Uga Dumpis.

Kasutusjuhend

OLE TEADLIK ⚠

- NÄOKAITSE DESINFITSEERIMINE ENNE ESMAKORDSET KASUTUST ON KOHUSTUSLIK!
- ÄRA KASUTA NÄOKAITSET KUI SELLE PUHTUSES JA DESINFITSEERITUSES EI SAA VEENDUDA!
- ÄRA KASUTA NÄOKAITSET KUI ÜKSKI SELLE OSADEST ON SAANUD KAHJUSTADA!

Puhastamine

Enne igat kasutamist puhasta näokaitse ja kõik selle osad sobiliku desinfitseeriva lahusega ja pese need sooja vee ja seebiga üle.

Puhastamiseks sobivad Euroopa Liidu poolt reguleeritud tavapäraseks kasutamiseks mõeldud puhastusvahendid või vähemalt 70% alkoholisisaldusega alkoholilahused. Loe rohkem COVID-19 puhanguga seotud rutiinsete puhastamiste ja desinfitseerimiste kohta siit: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html>

Desinfitseerimisprotseduuri jaoks ei ole näokaitset vaja uuesti lahti võtta.

Ära kasuta näokaitse puhastamiseks abrasiivseid käsnasid ega muid abrasiivseid materjale.

Läbipaistev visiir tuleks välja vaheta siis, kui see on potentsiaalselt saastunud, viga saanud ja/või kaotanud oma läbipaistvuse. contaminated, damaged and/or if it has lost its see true ability.

Näokaitse kasutamine

Iga näokaitse on mõeldud korduvkasutamiseks ainult ühele inimesele.

Rihmade korduv reguleerimine võib nende kinnitussavad ära kulutada.

Järgides ülalolevaid puhastamisjuhiseid, peaks iga läbipaistev visiir kestma vähemalt 10 päeva.

Näokaitset tuleks kasutada olukorras, kus potentsiaalselt haigetest inimestest ei ole võimalik tagada piisavat vahemaad, näiteks meditsiinitöötajad, poemüüjad jne.

Kokkupanemisjuhised

Näokaitse ei saabu kokkupanduna, see tuleb kasutaja poolt ise kokku panna (aega kulub 1-2 min).

Veendu kätte puhtuses enne näokaitse kokkupanemist!

Ka pakend võib olla saastunud, veendu näokaitse desinfitseerimises.

Jälgi kokkupanemisjuhiste samme 1 kuni 10. Kohanda rihmade suuruseid vastavalt vajadusele.


Näokaitset saab kasutada ka ilma polsterdusribata!

Kokkupanemine


1 Eemaldage polsterdusriba pealt kaitsekile.



2 Kleepige see raami siseküljele.

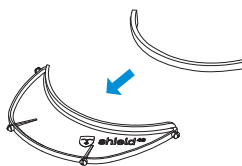


3 Pange ülemine rihm läbi raamis oleva pilu.

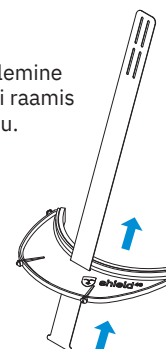

4 Küljerihma mõlemad otsad peaksid allapoole paindega olema ülespoole suunatud.




5 Kinnitage küljerihm raami serva ühe külje tihvtide külge.

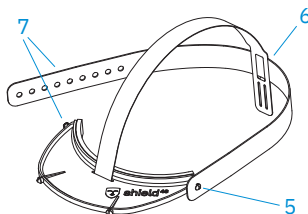


6 Pange küljerihm läbi ülemise rihma teises otsas oleva pilu. **Proovige – sõltuvalt pea suurusest valige ülemine või alumine lõige.**

7 Valides ühe külgrihma reguleerimisavade, reguleerige rihma sobivust ümber pea.

8 Eemaldage kaitsekile läbipaistva visiiri mõlemalt küljelt.

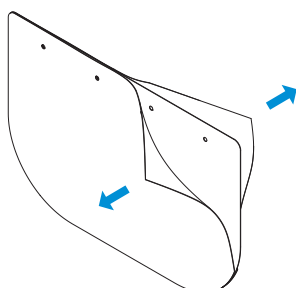

9 Kinnitage läbipaistev visiir raami tihvtide külge.

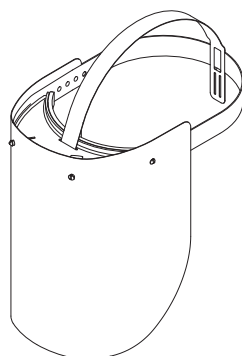

10 Valides mõne muu kinnitusava (samm 7), saate suurust vastavalt vajadusele reguleerida. Kui näokaitse on näo ees liiga madalal või liiga kõrge, valige mõni muu ülemise rihma pesa (samm 6).



www.shield48.eu/manual