

Uudelleenkäytettävä kasvosuoja – miellyttävää suojaa koko päiväksi



Tämä suoja on kehitetty yhdessä tehohoitoyksikön ja tartuntatautien ammattilaisten kanssa*

Kasvosuoja

Pääasiallinen käyttötarkoitus on suojata kasvoja suoralta kontaktilta nesteiden ja sumutteiden kanssa. Toissijainen tarkoitus on kasvojen suojaaminen suoralta kontaktilta mahdollisesti likaisten/kontaminoituneiden käsien kanssa.

DESINFIOI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA!

Kokoamisohjeet sivun toisella puolella.

Pakkauksen sisältö

1 x suojakehys	3 x läpinäkyvä suojus
1 x säädettävä yläkiinnike	1 x säädettävä sivukiinnike
1 x pehmuste suojakehykselle	1 x käyttöohjeet, jossa kokoamisohjeet

Valmistaja

3D Technology LTD
Rekisterinumero 42103085103
71 Gustava Zemgala gatve, Riika, LV-1039, Latvia

Säilytys

Avaamatonta pakettia voidaan säilyttää 12 kuukautta

Valmistuskuukausi

05.2020

Sertifiointi

 EU 2016/425

Estetyt vaarat

Suojaa vaarallisten aineiden roiskeilta – kasvoille kohdistuvat nesteet, sumutteet ja jätteet

Turvallisuusominaisuudet

- Suojaa koko kasvoja – ulottuu korviin asti kasvojen molemmin puolin.
- Suojaa kasvoja ylhäältä päin, erityisen tärkeää terveydenhuollon parissa työskenteleville, jotka hoitavat potilaita kumarassa.
- Helposti poistettavissa vahingon sattuessa
- Iskunkestävä – suojus ei rikoontu pudotettaessa tai taitettaessa.
- Suojaa kasvoja suoralta kontaktilta mahdollisesti likaisten käsien kanssa.
- Voidaan käyttää silmälasien, suojalasien, kirurgisen maskin ja hengityssuojaimen kanssa.
- Voidaan käyttää hattujen, suojahuppujen ja useimpien kypärien kanssa.

Materiaalit

Kehys	ABS (Akrylinitriilibutadieenistyreeni)
Kiinnikkeet	PET ja PVC (Polyetyleenitereftalaatti ja polyvinyylikloridi)
Suojus	PET (muunnelmiin sisältyy PET, PET-A, PET-G)
Pehmuste	Inertti kumi tai silikonit

Suojuksen tiheys

0,45 – 0,75 mm (kaikki paksuudet toimivat samalla tavalla ilman näköhäiriöitä – riippuu materiaalin saatavuudesta)

Uudelleenkäytettävä

Kyllä – tarkoitettu 1 henkilölle; voidaan käyttää uudelleen puhdistamisen ja desinfioinnin jälkeen

Desinfioitavissa

Kyllä – kaikki osat voidaan puhdistaa/pestä ja desinfioida tehokkaasti

Pääkiinnike

Kyllä – pään yli ja ympäri

Säädettävä istuvuus

Kyllä (kaikenkokoisille)

Nesteenkestävä

Kyllä – voidaan upottaa desinfiointiaineeseen ja/tai veteen

Mitat

Korkeus: 240 x leveys: 160 x syvyys: 136 mm (koottuna)

Nettopaino

78 – 105 grammaa suojuksen paksuudesta riippuen

Huomioitavaa

Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, jotka ovat pesunkestäviä ja desinfioitavia.

Kasvosuoja koostuu modulaarisista osista, ja jokainen osa voidaan korvata, mikä mahdollistaa kasvosuojan käytön jatkossakin. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen finlad@shield48.eu tiedustelaksesi varaosista.

Kasvosuojassa ei ole metalliosia eikä kangasosia.

Sarjaan kuuluu 3 läpinäkyvää visiiriä. Jokaista visiiriä voidaan käyttää vähintään 10 päivää, kun sitä käytetään oikein ja se puhdistetaan huolellisesti (kasvosuojaa yhteensä vähintään 30 päivää).

Jokaisen suojuksen kummallakin puolella on suojakalvo kuljetusnaarmujen ehkäisemiseksi – poista se ennen käyttöä!

Jokaista suojaa saa käyttää vain yksi henkilö. Tuotetta ei ole suunniteltu usean eri ihmisen käytettäväksi, eikä sen istuvuutta säädettäväksi useaan kertaan, sillä kiinnikkeiden liitosreiät voivat kulua tästä.

* Jokaisesta suunnittelupäätöksestä konsultoitin Paul Stradins Clinical University Hospitalin tartuntatautien ja epidemiologian neuvontayksikköä, jota johtaa professori Uga Dumpis, Riika (Latvia).

Käyttöohjeet

HUOMIOI ⚠

- SUOJA TÄYTYY DESINFIOIDA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA!
- ÄLÄ KÄYTÄ SUOJAA, JOS ET OLE VARMA, ONKO SE PUHDAS, JA ONKO SITÄ DESINFIOITU!
- ÄLÄ KÄYTÄ SUOJAA, JOS JOKIN SEN OSISTA ON VAURIOITUNUT!

Puhdistaminen

Ennen jokaista käyttökertaa, puhdista suojan kaikki osat asianmukaisella desinfiointiaineella ja pese tuote lämpimässä saippuavedessä.

Asianmukaisia desinfiointiaineita ovat EU:n kelpuuttamat kotitalousdesinfiointiaineet, kotitalousvalkaisuliuokset ja vähintään 70-prosenttiset alkoholiliuokset. Lue lisää COVID-19-suosituksista liittyen yleiseen puhdistamiseen ja desinfiointiin täältä: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html>

Tuotetta ei tarvitse purkaa osiin, jotta se voitaisiin desinfioida.

Älä käytä hiovia sieniä/materiaaleja suojan puhdistamiseen.

Visiiri tulee vaihtaa, jos se on mahdollisesti saastunut, vaurioitunut ja/tai jos siitä ei enää näe kunnolla läpi.

Suojan käyttäminen

Suojaa voi käyttää yksi henkilö useamman kerran.

Suojan istuvuutta ei saa säätää useaan kertaan, sillä kiinnikkeiden liitosreiät voivat tästä kulua.

Yhden visiirin tulisi kestää vähintään 10 päivää, kun yllä olevia puhdistusohjeita noudatetaan huolellisesti.

Kasvosuojaa tulee käyttää sellaisissa olosuhteissa, joissa mahdollisesti sairastuneita henkilöitä ei voi hoitaa turvalliselta etäisyydeltä, kuten sairaanhoitajat, lähihoitajat, myymälätyöntekijät jne.

Kokoamisohjeet

Kasvosuoja toimitetaan osissa, ja käyttäjän täytyy koota se itse (vie 1-2 min).

Varmista, että kätesi ovat puhtaat ennen kuin alat kokoamaan suojaa!

Ehkäise tuotteen likaantumista desinfiomalla ja pitämällä suojasta huolta.

Seuraa kokoamisoppaan vaiheita 1-10.

Säädä kiinnikkeiden kokoa tarpeen mukaan.


Suojaa voidaan käyttää myös ilman pehmustetta!

Kokoaminen


1 Poista suojakalvo pehmusteliuskasta.



2 Kiinnitä se kehyksen sisäpuolelle.

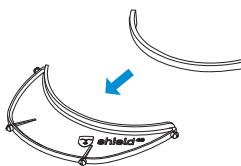

3 Työnnä yläkiinnike kehyksen aukosta läpi.

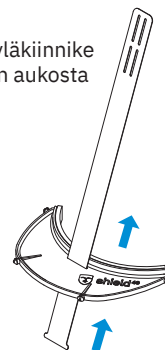


4 Sivukiinnikkeiden molempien päiden tulee osoittaa ylöspäin mutkan ollessa alimpana.

5 Kiinnitä sivukiinnike yhteen kehyksen tapeista.

6 Pujota sivukiinnike yläkiinnikkeen toisessa päässä olevan raon läpi. **Kokeile – valitse ylempi tai alempi leikkauskohta pään mukaan.**



7 Säädä pään istuvuutta valitsemalla yksi sivukiinnikkeen säätörei'istä.

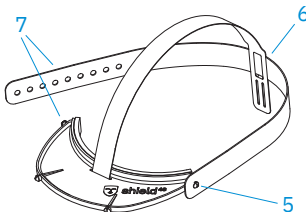

8 Poista suojakalvo visiiriin molemmilta puolilta.

9 Kiinnitä visiiri kehyksen tappeihin.

10 Säädä istuvuutta tarpeen mukaan valitsemalla eri leikkauskohta (vaihe 7) tai jos suojan istuvuus on liian matala tai korkea, valitse toinen yläkiinnikkeen rei'istä (vaihe 6).

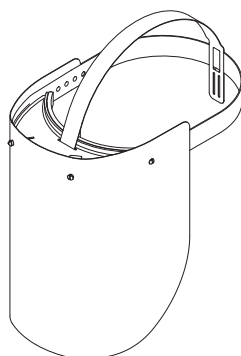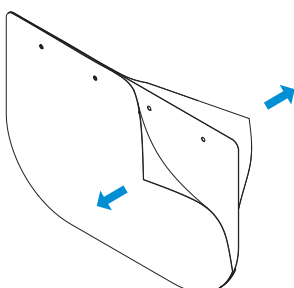

www.shield48.eu/manual