



Vairākkārt lietojams Sejas Vairogs – drošība un komforts visas dienas garumā!



Šī sejas vairoga dizains tika izstrādāts kopā ar intensīvās terapijas nodaļas un infektoloģijas speciālistiem*

Sejas vairogs

Sejas vairoga galvenais uzdevums ir aizsargāt lietotāja seju un acis no tieša kontakta ar potenciāli kaitīgiem šķidrumiem un infekcijām, kas pārvietojas gaisa pilienu ceļā. Sekundāra sejas vairoga funkcija ir ierobežot tiešu kontaktu sejai, piemēram, nejauši pieskaroties ar rokām.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES SEJAS VAIROGS OBLIGĀTI JĀDEZINFICĒ!

Vairoga salikšanas instrukcija ir lapas otrā pusē.

Iepakojuma saturs

1 × sejas vairoga rāmis	1 × pielāgojama augšējā lenta
1 × rāmja polsteris	3 × caurspīdīgi ekrāni
1 × pielāgojama sānu lenta	1 × lietošanas un salikšanas instrukcija

Ražotājs

3D Technology SIA
Reģistrācijas Nr. 42103085103
Gustava Zemgala gatve 71, Rīga,
LV-1039, Latvija

Izplatītājs

Magnum Medical SIA
Reģistrācijas Nr. 40003060393
Ulbrokas iela 23, Rīga,
LV-1021, Latvija

Uzglabāšana

Neatvērtu iepakojumu var uzglabāt 24 mēnešus

Ražošanas mēnesis

05.2020

CE marķējums



EU 2016/425

Svarīgas piezīmes

Visas vairoga komponentes ir izgatavotas no materiāliem, kurus var mazgāt un dezinficēt

Sejas vairogs sastāv no modulārām komponentēm, kur katra no komponentēm var tikt atsevišķi nomainīta saglabājot vairoga funkciju.

Sazinieties ar info@shield48.eu, lai saņemtu informāciju par komponentu pieejamību.

Sejas vairogam nav nevienas metāla vai auduma komponentes.

Sejas vairoga komplektā ir iekļauti 3 caurspīdīgi ekrāni. Rūpīgi kopjot vairogu un ekrānu, tam vajadzētu kalpot vismaz 10 dienas (komplektam 30 dienas)

Katra ekrāna abās pusēs ir ekrānu aizsargājoša plēve, kas nodrošina to, lai ekrāns netiktu saskrāpēts piegādes laikā. Noņemiet šo plēvi, pirms ekrāna lietošanas.

Vairogs paredzēts lietošanai vienai personai. Viena vairoga lietošana vairākām personām nav ieteicama. Tāpat ieteicams izvairīties no atkārtotas vairogu lentu regulēšanas, jo tas var bojāt lentu stiprinājumu caurumus.

Aizsardzības veids

Aizsargā seju no bīstamu materiālu šļakstiem, kas pārvietojas pilienu vai aerosolu veidā

Funkcionalitāte

- Aizsedz visu seju – ekrāns sniedz līdz ausīm abās sejas pusēs
- Aizsargā seju no augšpusē, kas ir īpaši svarīgi veselības aprūpes darbiniekiem, kas noliecas, lai rūpētos par pacientu
- Viegli noņemams, ja noticis negadījums
- Izturīgs – ekrāns nesaplīsīs, ja tas tiks nomests zemē vai saliekts
- Ierobežo iespēju pieskarties sejai ar nedezinficētām rokām
- Iespējams valkāt kopā ar brillēm, aizsargbrillēm, ķirurģiskajām maskām un respiratoriem
- Iespēja valkāt kopā ar cepuri, kapuci un dažādu veidu ķiverēm

Materiāli

Rāmis	PET (iespējamās variācijas PET, PET-A, PET-G)
Lentas	PET un PVC (polietilēna tereftalāts un polivinilhlorīds)
Ekrāns	PET (iespējamās variācijas PET, PET-A, PET-G)
Polsteris	Inerta gumija vai silikons

Ekrāna biezums

0.45 līdz 0.75 mm (Visiem ekrāna biežumiem ir līdzvērtīga funkcionalitāte. Nerada optiskus traucējumus un netraucē redzamībai. Iepakojumā esošā ekrāna biezumu nosaka materiāla pieejamība)

Vairākkārt izmantojams

Jā – paredzēts vienam lietotājam. Pēc katras lietošanas, jāmazgā un jādezinficē

Dezinficējams

Jā – visas detaļas ir mazgājamas un piemērotas dezinficēšanai

Galvas stiprinājums

Jā – lenta pāri galvai un lenta apkārt galvai

Maināms izmērs

Jā – piemērots visiem galvu izmēriem

Noturība pret šķidrumiem

Jā – vairogu saliktā veidā var mērcēt dezinfekcijas līdzeklī un/vai ūdenī

Izmēri

P 360 × A 240 mm (iekpojuma izmērs)
P 160 × A 240 × D 136 mm (saliktā veidā)

NETO svars

Atkarībā no ekrāna biezuma 78 līdz 105 grami

www.shield48.eu info@shield48.eu

* Izstrādājot vairogu visi dizaina elementi tika saskaņoti ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas konsultatīvais dienests speciālistiem prof. Uga Dumpja vadībā.



Lietotāja instrukcija

UZMANĪBU ⚠️

- PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES SEJAS VAIROGS OBLIGĀTI JĀDEZINFICĒ!
- NELIETOJIET SEJAS VAIROGU, JA NAV IESPĒJAMS PĀRLIECINĀTIES, VAI TAS IR TĪRS UN DEZINFICĒTS!
- NELIETOJIET SEJAS VAIROGU, JA KĀDA NO TĀ SASTĀVDAĻĀM IR BOJĀTA!

Tīrīšana

Pirms katras lietošanas reizes vispirms notīriet sejas vairogu un visas tā sastāvdaļas ar atbilstošu dezinfekcijas līdzekli un pēc tam nomazgājiet siltā ziepjūdenī.

Dezinfekcijai visatbilstošākie ir atšķaidīti sadzīves balinātāju šķīdumi, spirta šķīdumi, kas satur vismaz 70% alkohola, kā arī ES un EPA reģistrētie māsaimniecības dezinfekcijas līdzekļi. Vairāk par ieteicamajiem dezinfekcijas līdzekļiem, tīrīšanas un dezinfekcijas ieteikumiem var izlasīt Slimību un profilakses kontroles centra mājas lapā: <https://ej.uz/spkcgov>

Pirms dezinficēšanas vairogs nav jāizjauc.

Vairoga tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus materiālus.

Sejas vairoga ekrāns ir jānomaina, ja tas zaudējis savas caurredzamības īpašības, nav notīrāms, vai ir aizdomas, ka tas ir inficēts

Vairoga lietošana

Vairogs ir paredzēts vairākkārtējai lietošanai vienai personai.

Ieteicams izvairīties no atkārtotas vairogu lentu regulēšanas, jo tas var bojāt lentu stiprinājumu caurumus.

Sekojo tīrīšanas instrukcijai, katram caurspīdīgajam ekrānam vajadzētu kalpot vismaz 10 dienas.

Sejas vairogu ieteicams lietot, ja jāatrodas tuvumā un/vai jākomunicē ar, iespējams, slimiem cilvēkiem

Salikšanas instrukcija

Sejas vairogs ir iepakots nesalikts. Pirms lietošanas tas ir jāsaliek un šis process aizņems 1-2 minūtes.

Pirms vairoga salikšanas pārlicinieties, ka jūsu rokas ir tīras.

Ievērojot uzmanību, pirms vairoga salikšanas to ir nepieciešams dezinficēt, lai novērstu risku, ka tas ir nonācis saskarē ar kaitīgām / infekciozām vielām.

Lai saliktu vairogu, sekojiet salikšanas instrukcijas soļiem no 1 līdz 10. Pielāgojiet lentas atkārtoti, ja tas nepieciešams.


Vairogu var lietot bez rāmja polsterējuma!

Salikšana


- 1** Noņemiet aizsargplēvi no polstera pašlīmējošās virsmas.



- 2** Pielīmējiet polsteri rāmja iekšpusē.

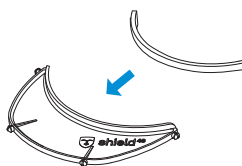


- 3** Izveriet augšējo lentu cauri rāmim.

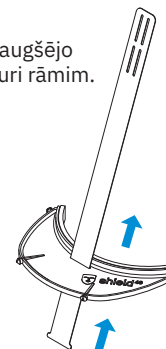

- 4** Sānu lentas abiem galiem jābūt vērstiem uz augšu, tā lai izliekums būtu apakšā.




- 5** Piespraudiet sānu lentu uz vienas no rāmja malā esošajām tapiņām.

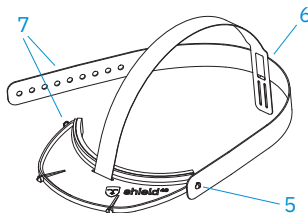


- 6** Izveriet sānu lentu cauri augšējās lentas izgriezumam. **Piemēriet – atkarībā no galvas izmēra, izvēlieties augšējo vai apakšējo izgriezumu.**

- 7** Pielāgojiet sānu lentas garumu, izvēloties to piespraušanas caurumu, kas vislabāk nostiprina rāmi pie galvas.

- 8** Noņemiet aizsargplēvi no abām ekrāna pusēm.

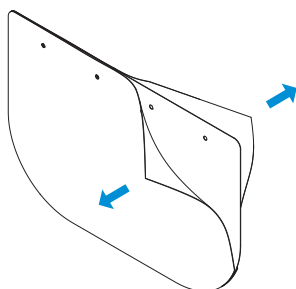

- 9** Piespraudiet ekrānu uz tapiņām rāmja priekšpusē

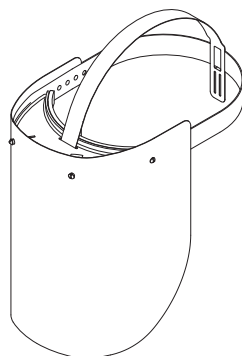

- 10** Pēc nepieciešamības, pielāgojiet izmērus, izvēloties citu piespraušana caurumu uz sānu lentas (solis 7). Ja vairogs atrodas pārāk augstu vai zemu, izvēlieties otru izgriezumu uz augšējās lentas (solis 6).



www.shield48.eu/manual